

GlucO/Rx  
Nexus  
TD-4277

جهاز مراقبة  
السكر في الدم



دليل المستخدم للبداية السريعة

عزيزي مالك جهاز: GlucoRx TD-4277


نشكرك على اختيار جهاز مراقبة السكر في الدم GlucoRx TD-4277 للسيطرة على مرض السكري.

إن جهاز GlucoRx TD-4277 سوف يساعدك في متابعة مستويات السكر في الدم لديك.

وسوف يساعدك دليل المستخدم للبداية السريعة في إعداد الجهاز واختبار مستويات السكر في الدم لديك. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز. للحصول على المعلومات الكاملة عن استخدام الجهاز ومزاياه، يرجى الرجوع إلى دليل المالك.




جهاز شريط

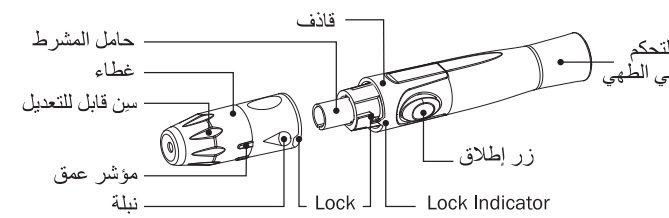

سوف يتوقف القياس تلقائيًا عندما تكتمل الإعدادات لحذف الذاكرة، يرجى الرجوع إلى دليل المالك للحصول على التفاصيل

## 1. ضبط المقياس

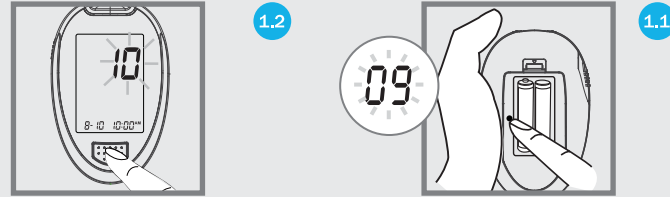


اضغط على الزر "M" لتغيير القيم. استمر في الضغط على الزر لزيادة العدد بسرعة كبيرة. اضغط على الزر "ضبط" للانتقال إلى الخطوة التالية.




يومض التاريخ. اتبع الخطوة 12 لإتمام التغييرات. تسلسل الإعدادات:

- (1) التاريخ
- (2) 12 ساعة/24 ساعة
- (3) الوقت
- (4) حذف الذاكرة
- (5) وظيفة المنبه ← إيقاف


الشكل الأمامي للمقياس

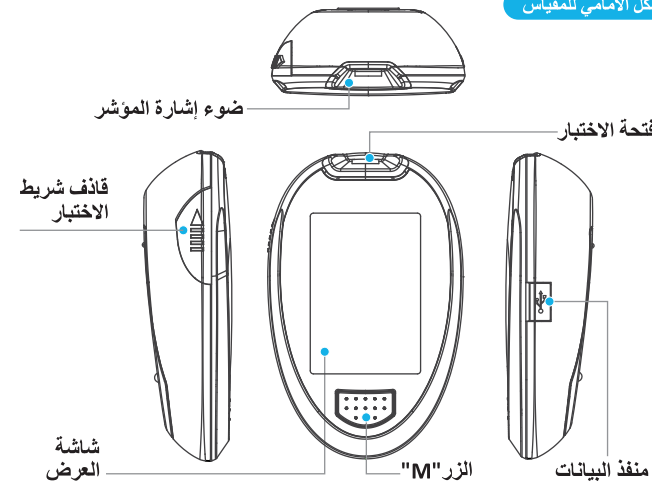


الشكل الخلفي للمقياس

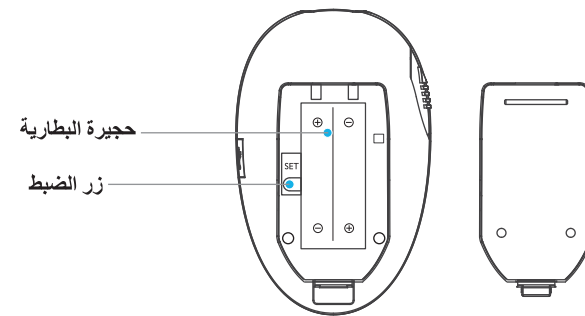

## 2. ضبط جهاز الشريط

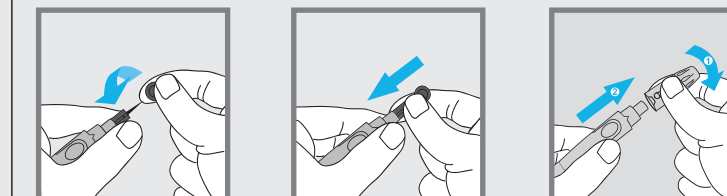

افتح غطاء جهاز الشريط. أدخل مشريط في حامل المشريط وادفعه للأسفل بثبات حتى يتم تأمينه بصورة كاملة.

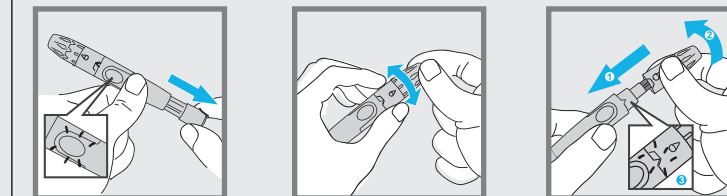

استبدل الغطاء من خلال ضبط السن على الغطاء مع زر الإطلاق. اسحب غطاء التحكم في الطهي حتى يصدر نكة. سوف ترى تغير اللون داخل زر الإطلاق عندما يكون جاهزًا.

## 3. اختبار السكر في الدم لديك.



اغسل يديك وجففها جيدًا. أخرج شريط اختبار ثم أغلق القنينة بإحكام.



أدخل شريط اختبار لتشغيل المقياس. يأتي تسلسل العرض كالتالي "CHK": "و" ← جومض "ه" مع التاريخ والوقت.

## 3. اختبار السكر في الدم لديك.



اضغط برفق حول منطقة الثقب للحصول على كمية دم كافية.



بعد أن يعد المقياس حتى الرقم "0"، سوف تظهر نتيجة الاختبار مع التاريخ والوقت وسوف يتم تخزينها تلقائيًا في الذاكرة.

## 4. قراءة النتيجة

سوف تعرض نتيجة سكر الدم الخاصة بك الرسائل التالية:

تظهر	عندما يكون السكر
1.1 < ميمول/لتر (20 مجم/ديسليتر)	
المكتونات؟	1.15 < ميمول/لتر (270 ميمول/لتر)
H	33.3 < ميمول/لتر (660 مجم/ديسليتر)

وقت اليوم	الدرجة العادية للسكر في الدم بالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري (ميمول/ديسليتر)
الصيام وقبل الأكل	4 إلى 7 ميمول/ديسليتر (72 إلى 126 مجم/ديسليتر)
ساعتان بعد الوجبة	9 < ميمول/لتر (162 مجم/ديسليتر)

المصدر: السكري، المملكة المتحدة. هدف السكر في الدم، التوازن: الرقم 234، 2012

يرجى استشارة طبيبك لتحديد الحد المستهدف الأفضل لك.

للاختبار بمحلول التحكم، يرجى الرجوع إلى دليل المالك للحصول على المعلومات المفصلة.