

Glucor/Rx
Nexus
TD-4277

جهاز مراقبة السكر في الدم



دليل المستخدم للبداية السريعة

عزيزي مالك جهاز: GlucoRx TD-4277


نشكرك على اختيار جهاز مراقبة السكر في الدم GlucoRx TD-4277 للسيطرة على مرض السكري.

إن جهاز GlucoRx TD-4277 سوف يساعدك في متابعة مستويات السكر في الدم لديك.

وسوف يساعدك دليل المستخدم للبداية السريعة في إعداد الجهاز واختبار مستويات السكر في الدم لديك. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز. للحصول على المعلومات الكاملة عن استخدام الجهاز ومزاياه، يرجى الرجوع إلى دليل المالك.



جهاز شريط

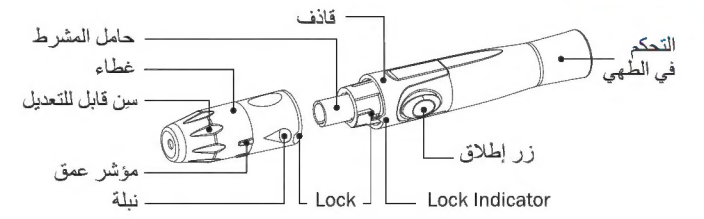


سوف يتوقف القياس تلقائيًا عندما تكتمل الإعدادات لحذف الذاكرة، يرجى الرجوع إلى دليل المالك للحصول على التفاصيل.


الشكل الأمامي للمقياس



الشكل الخلفي للمقياس

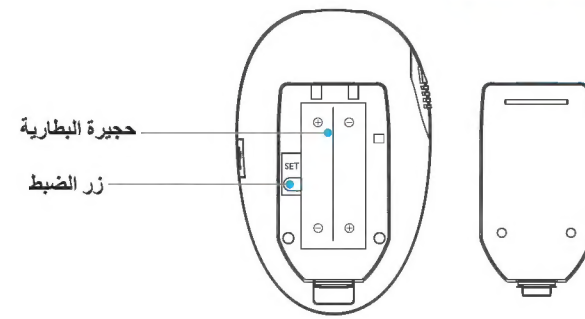

1. ضبط المقياس

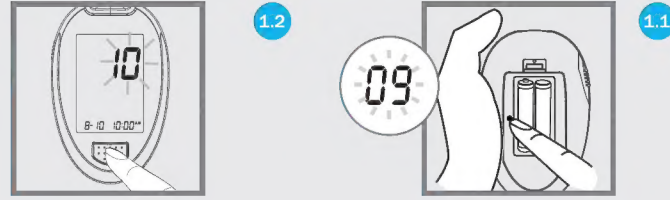

اضغط على الزر "M" لتغيير القيم. استمر في الضغط على الزر لزيادة العدد بسرعة كبيرة. اضغط على الزر "ضبط" للانتقال إلى الخطوة التالية.


اضغط على الزر "ضبط" البدء الإعداد. "تومض الكلمة" سنة "أولاً".



يومض التاريخ. اتبع الخطوة 1.2 لإتمام التغييرات. تسلسل الإعدادات:

- (1) التاريخ
- (2) 12 ساعة/24 ساعة
- (3) الوقت
- (4) حذف الذاكرة
- (5) وظيفة المنبه ← إيقاف


2. ضبط جهاز الشريط

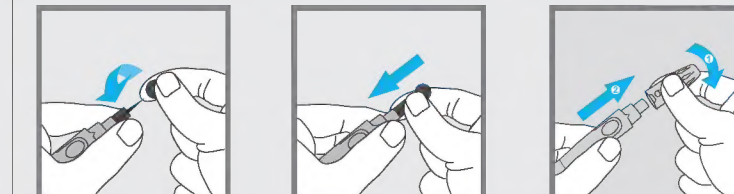

افتح غطاء جهاز الشريط.

أدخل مشريط في حامل المشريط وادفعه للأسفل بثبات حتى يتم تأمينه بصورة كاملة.

لف القرص الواقي لفصله من المشريط.

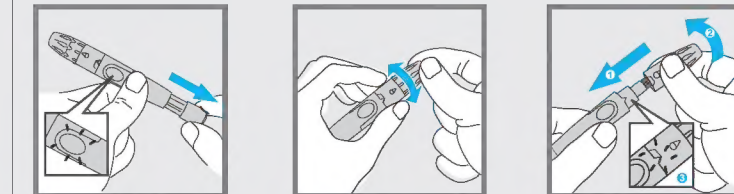

استبدل الغطاء من خلال ضبط السن على الغطاء مع زر الإطلاق.

حدد عمق الاختراق من خلال تدوير السن القابل للتعديل في أي اتجاه من الاتجاهين حتى تشير النبلة الموجودة على الغطاء إلى العمق المطلوب.

اسحب غطاء التحكم في الطهي حتى يصدر نكة. سوف ترى تغير اللون داخل زر الإطلاق عندما يكون جاهزاً.

3. اختبار السكر في الدم لديك.



اغسل يديك وجففها جيداً. أخرج شريط اختبار ثم أغلق القنينة بإحكام.

اقطع لاصقة الأمان (ختم الإغلاق). عند فتح القنينة للمرة الأولى، سجل التاريخ على الملصق.



خذ جهاز الشريط المعد مسبقاً. امسك جهاز القطع بثبات في مقابل موقع الثقب. اضغط على زر الإطلاق للحصول على قطرة دم.

أدخل شريط اختبار لتشغيل المقياس. يأتي تسلسل العرض كالتالي "CHK": "CH" مع "يومض" "ه" مع التاريخ والوقت.

3. اختبار السكر في الدم لديك.



في الوقت الذي تومض فيه "ه" في شاشة العرض، امسك فتحة امتصاص شريط الاختبار وامسكها للحصول على قطرات الدم حتى يتم ملء نافذة التأكيد بصورة كاملة.

اضغط برفق حول منطقة الثقب للحصول على كمية دم كافية.



بعد أن يعد المقياس حتى الرقم "0"، سوف تظهر نتيجة الاختبار مع التاريخ والوقت وسوف يتم تخزينها تلقائيًا في الذاكرة.

أخرج شريط الاختبار. تخلص من الشريط المستخدم والشريط بعناية.

4. قراءة النتيجة

سوف تعرض نتيجة سكر الدم الخاصة بك الرسائل التالية:

تظهر	عندما يكون السكر
1.1 < ميمول/لتر (20 مجم/ديسيلتر)	
1.15 < ميمول/لتر (270 مجم/ديسيلتر)	
1.33 < ميمول/لتر (660 مجم/ديسيلتر)	

وقت اليوم	الدرجة العادية للسكر في الدم بالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري (ميمول/ديسيلتر)
الصيام وقبل الأكل	4 إلى 7 ميمول/ديسيلتر (72 إلى 126 مجم/ديسيلتر)
ساعتان بعد الوجبة	9 < ميمول/لتر (162 مجم/ديسيلتر)

المصدر: السكري، المملكة المتحدة. هدف السكر في الدم، التوازن: الرقم 234، 2012

يرجى استشارة طبيبك لتحديد الحد المستهدف الأفضل لك.

مؤسسة تاي دوك للتكنولوجيا
3 أيف، كاف، رقم 127، طريق وجوج الثاني، 24888
وجو تاونشيب، تايي كارنتي، تايوان
www.taiooc.com

CE 0123 IVD 1 For self-testing
018.427100 0.9

ميدلاند ديم.
بوركنغهام 10 48163 هومستر. ألمانيا
322662 251 49 + فاكس 322662 251 49 +
موزع من قبل
دي إي إي
بورنوتون، مونومنت واي ويست
وكينج، سوري، جي يو 21 5
موقع الويب: www.glucorx.co.uk
رقم مركز الاتصال: 01483 755133